

Használati utasítás - In Face szőrtelenítő készülék

Bevezető

Az inFace DF-IPL szőrtelenítést a ShenzheninFaceTechnology Co., Ltd. fejlesztette és gyártja, amely a Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.-hez tartozik. A vállalat megalapítása óta a praktikum, a funkcionalitás és a biztonság alapelvei alapján készült. A vállalkozás célja a technológián és intellektuson alapuló termékek létrehozása, valamint a fejlesztésre és az innovációra való törekvés. A DF-IPL szőrtelenítő új technológián alapul, melynek neve a Kettős fagyasztásos-intenzív pulzáló fény.

Az inFace DF-IPL szőrtelenítő kristály vakus barázdákat és hűtőpárna kialakítást alkalmaz, amely kettős hűtést tesz lehetővé a felhasználói élmény fokozása érdekében. Eltér a piacon lévő többi terméktől. Az inFace DF-IPL szőrtelenítés jobb élményt nyújt Önnek.

Bevezetés a működési elvbe

A specifikus erős pulzáló fény besugárzása alatt a bőrben lévő melanin több fényenergiát nyel el, és azonnali hőt ad át a szőrtüszőnek; amikor a szőrtüsző egy bizonyos hőmérsékletre felmelegedik, nyugalmi állapotba lép, és a szőr növekedése lassan leáll és kihullik. A szőrtelenítő hatás 6 hetes vagy hosszabb folyamatos használat után érhető el. A beépített optikai szűrő kiszűri a káros fényt, például az ultraibolya sugarakat, és nincs hatással a bőr egészségére. Kérjük, emiatt ne aggódjon, használja bátran. A jégborogatás funkció hatékonyan enyhíti az égő érzést a szőrtelenítés során.

Óvintézkedések

FIGYELEM:

- Ne használja a készüléket kád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó edény közelében.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt, és őrizze meg.
- A hibás működés elkerülése érdekében a töltéshez feltétlenül a termékhez mellékelt adaptercsatlakozót használja. (*Mindenképpen az in Face dedikált adaptert használja.)
- A használat során lehetőleg ne egyen fényérzékenységet okozó ételeket (pl. spenót, repce, mustár stb.).
- Ne használjon illóolajos ápolószereket ezzel a termékkel együtt.
- Azok számára, akik előzőleg más szőrtelenítési módszereket használtak, kérjük, várják meg, amíg a szőr kinő, mielőtt használnák a készüléket.
- Az energiaszint beállítása a gyengétől az erősig terjed. Ha a bőr elviseli, minél nagyobb az energia, annál jobb a hatás. Ha sötétebb bőrrel dolgozik, ügyeljen arra, hogy ne válasszon túl magas energiaszintet, különben megégeti a bőrt.

- Kérjük, kerülje az ultraibolya sugárzást használat közben, tegyen fényvédő intézkedéseket, amikor kimegy a szabadba, alkalmazzon védőkrémet vagy fényvédő krémet a bőr védelme érdekében; próbálja elkerülni a számítógépes sugárzást munka közben.
- A műszer használata és kikapcsolása után vattacsomót vagy kis mennyiségű orvosi alkoholba mártott pormentes ruhát (vagy alkoholos vattát) használjon a lámpafej üvegén lévő foltok tisztításához. Tilos alkoholt közvetlenül a lámpa fedelére permetezni.
- Ha a műszer használata során szőr vagy foltok tapadnak a fénykibocsátó barázda szélén lévő műanyagra, a lámpafej szélén lévő műanyag fekete lesz, vagy fekete foltok jelennek meg. Bár ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét és normál használatát, amennyire csak lehetséges, kerülni kell.
- A termékek nem rendelkeznek vízálló funkcióval, kérjük, ne használja a fürdőszobában vagy más olyan helyen, ahol a víz könnyen hozzáférhető.
- Ha a termék burkolata vagy a lámpafej megsérül, vagy véletlenül vízbe merül, kérjük, küldje vissza a gyártóhoz javításra.
- Tartsa távol ezt a terméket az erős mágneses mezőtől, nedvességtől, erős portól vagy magas hőmérséklettől.
- Ne fejtse ki erős ütések a termékre, és ne használja a terméket a rendeltetésszerű használaton kívül más célra.
- Szakemberen kívül más ne nyissa fel a termék burkolatát engedély nélkül, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn; nem szakembereknek szigorúan tilos engedély nélkül javítani.

Ne alkalmazza a készüléket a következők fennállásakor

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a termék nem alkalmas a következő személyek számára.
- Gyermekek, terhes nők, heges bőrfelülettel rendelkezők, nők menstruáció vagy szoptatás alatt. Ezekben az esetekben tilos a készülék használata.
- Ne használja, ha visszér vagy értágulat tünetei vannak.
- Ne használja herpes simplex tüneteivel, bőrelváltozásokkal vagy hematómával.
- Fényérzékenység és egyéb betegségek okozta szövődmények esetén nem ajánlott.
- Szívbetegségben, cukorbetegségben, magas vérnyomásban, rosszindulatú daganatban, tüszőgyulladásban, fertőző bőrbetegségben, égett bőrben és véralvadásgátló rendellenességben szenvedőknek tilos a használata.
- Aszpirin és immunszuppresszánsok szedése közben óvatosan alkalmazza
- A közelmúltban alkalmazott fényérzékeny gyógyszerek (például tetraciklin, szulfa stb.) egyelőre nem javasoltak.
- Nem ajánlott azoknak, akik egy héten belül használtak fehéritő termékeket vagy A-vitamin tartalmú termékeket.
- Azok számára, akik az elmúlt két hétben napoztak vagy leégtek, bőrvitalis után használja.

- Az érzékeny bőrű emberek óvatosan használják ezt a terméket. Ha kellemetlen érzés jelentkezik a bőrön, azonnal abba kell hagyniuk a használatát, és orvoshoz kell fordulniuk.
- Használata tilos érzékeny részeken, például nyálkahártyákon és intim területeken (például szemhéjak, ajkak, mellbimbók, hüvely stb.).

A termék paraméterei

Termék neve: Arc DF-IPL szőrtelenítésben

Modell: ZH-01E

Névleges bemeneti teljesítmény: DC12V=4A

Termék mérete: 73 x 44 x 157 mm

Maximális kimeneti teljesítmény: 48W

Nettó tömeg: kb 304g


Fénykibocsátó terület: 3,3 cm²

Bemeneti feszültség: 100~240V

Élettartam: 550 000 villanási idő

A doboz tartalma

1. InFace DF-IPL szőrtelenítő x1
2. Tápadapter x1
3. Védőszemüveg x1
4. Borotva x1
5. Felhasználói kézikönyv x1

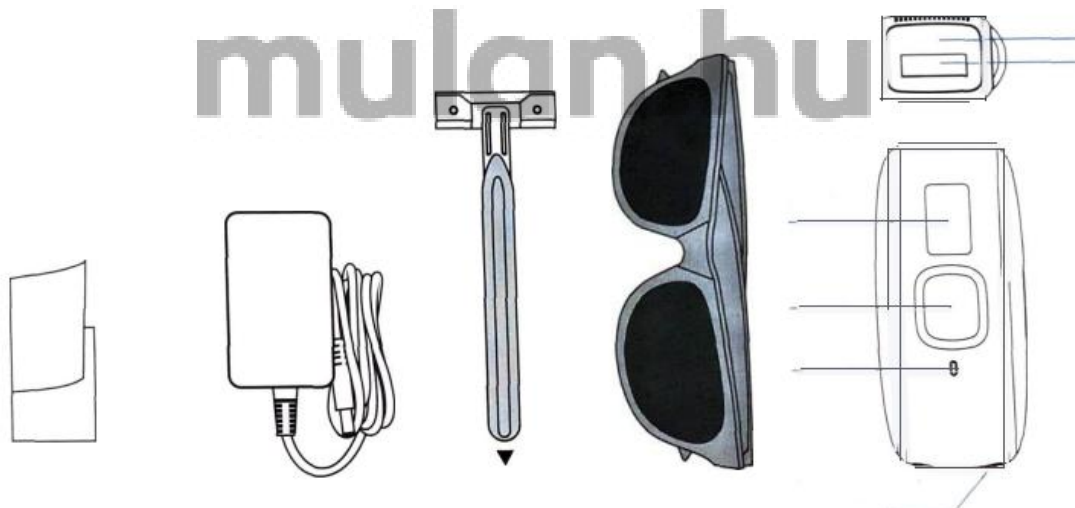

Megjegyzés: A kézikönyvben szereplő termékképek és a vonatkozó jellemzők leírása, valamint egyes főnevek magyarázata csak referenciaként használható, a felhasználóknak a tényleges tárgyra kell alapozniuk. Tekintettel a Face termékek folyamatos fejlesztésének következetes politikájára, jogot kaptunk a termékek specifikációinak további értesítés nélküli megváltoztatására.

Használat előtti tudnivalók

- Ne töltse, a termék csatlakoztatás után használható. Használat után húzza ki a tápkábelt, és helyezze hűvös és száraz helyre a terméket.
- Ha a szőr 1 mm-nél hosszabb, javasoljuk, hogy a borotvát használja a borotválkozáshoz. A túl hosszú szőr a bőr felszínén felszívja a hőt, bőrpírt és duzzanatot okoz, a megperzselt szőr pedig sajátos szagot áraszt, ami befolyásolja a termék használatának élményét.
- Tekintettel az eltérő bőrfelületre, azon a területen, ahol az első használatkor szőrtelenítésre van szükség, kis felületű tesztet kell végezni, amely 12 óra elteltével a többi területen is használható mellékhatások nélkül.
- Ne használja a magas szintet közvetlenül az első alkalommal történő szőrtelenítéshez. Ha a szint túl magas, az bőrnek kellemetlenséget vagy akár allergiát okozhat. A legjobb, ha elkezdi használni az első szintet, és bőre lassan alkalmazkodik, és igazodik a megfelelő szinthez az aktuális helyzetnek megfelelően.
- A termék használatakor ne sugározza be többször ugyanazt a részt, hanem minden bőrfelületet egyenletesen sugározzon be.
- Ne használja mások felé, oldalra fordítva. A termék erős fényt bocsát ki, ami kellemetlenséget okozhat a szem számára.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- A felhasználói karbantartás során óvintézkedéseket kell tenni, a megfelelő részleteket meg kell adni.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

Alkalmazható bőrtónusokra:

Fehér bézs

Világosbarna Barna

Sötétbarna

Használat

1. Kérjük, először borotvával borotválja le a szőrtelenítési területet, hogy a bőr száraz maradjon.



2. Csatlakoztassa a terméket az adapterhez, és dugja be a konnektorba.

3. A termék használata előtt viseljen védőszemüveget.




4. Nyomja meg hosszan az ON/OFF (Funkciókapcsoló) gombot a bekapcsoláshoz.

5. Nyomja meg röviden az ON/OFF (Funkciókapcsoló) gombot a szőrtelenítési energiaszint váltásához, kérjük, válassza ki a megfelelő szintet az igényeinek megfelelően.

6. Nyomja meg röviden a jégtömörítés mód gombot a jégtömörítés funkció be-/kikapcsolásához (a hűtés és a fénykibocsátás egyidejűleg is végrehajtható).



7. Fogja meg a fogantyút, és helyezze a lámpafejet közel a bőrhöz (a vakujelző kék fénye mindig világít, jelezve, hogy fény bocsátható ki, ha a kék fény nem világít, állítsa a lámpafej helyzetét közel a bőrhöz, amíg a vakujelző kék fény villogni nem kezd), kézzel nyomja meg a vaku gombot, mozgassa a fogantyút a szőrtelenítéshez.

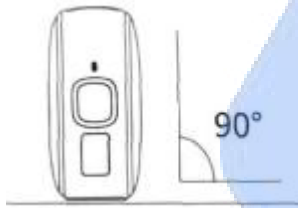

8. A bekapcsolás alapértelmezés szerint kézi üzemmódban van. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vaku gombot, hogy automata üzemmódba váltsón (automatikus módban, amikor a lámpa közel van a bőrhöz, folyamatosan villan a szőrtelenítéskor).

Kérjük, ne sugározza be többször ugyanazt a részt, hanem minden bőrt egyenletesen sugározzon be.

9. Nyomja meg hosszan a BE/KI (Funkciókapcsoló) gombot a kikapcsolási védelmi programba való belépéshez, várjon 10 másodpercet a kikapcsoláshoz.

10. A szőrtelenítés után tegye meg a fényvédő intézkedéseket, és ne érintse meg a vizet 6 órán belül.


Szőrtávolítási ciklusok

Az adatok személyenként eltérőek lehetnek

1-2 hét	Heti 3-szor	A szőrnövekedés lelassul	
3-4 hét	Heti kétszer	A szőr vékony és puha lesz, a fekete végek kihullanak	
4-8 hét vagy több	Egyszer-kétszer havonta	A pórusok természetes zsugorodása, a szőrnövekedés megáll	

Szőrtávolítási tanácsok

A kezelések hossza személyenként eltérő lehet, így a bőrreakciók függvényében alkalmazza a készüléket.

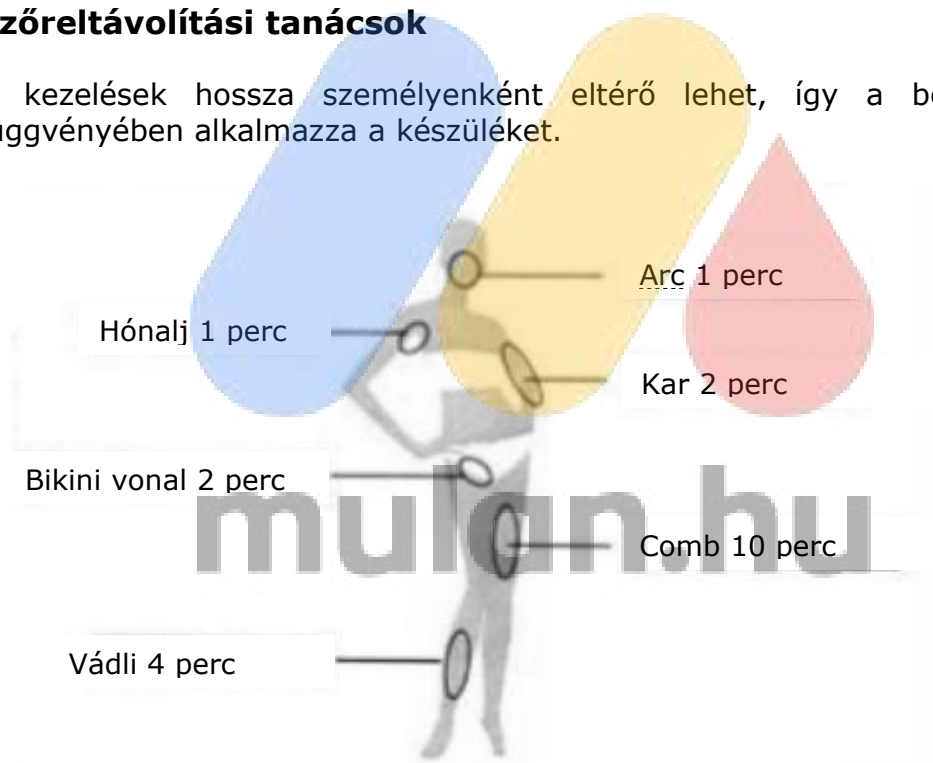

Tippek

- Téli vagy száraz bőr esetén ügyeljen a napi bőrápolásra a szőrtelenítés előtt és után, a hidratálásra.
- Használat közben védőszemüveget kell viselnie. Ne nézzen közvetlenül a villogó fénybe, és ne világítson közvetlenül a szemébe.
- Használat közben ne vigyen fel semmilyen zselészerű kozmetikumot vagy folyadékot a bőrre, például gélt, nehogy károsítsa a bőrt vagy a műszert.
- Használat után ügyeljen a bőr hidratálására és a fényvédelemre, és 6 órán belül ne érintkezzen vízzel.

- Használat után az olyan tünetek, mint az enyhe bőrpír és viszketés ritkák, de normálisak. A termék használata előtt megvárhatja, amíg a bőr magától helyreáll.

Kérdések és válaszok

Ha problémát talál használat közben, kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot a rendellenesség elhárításához.

Ha a probléma nem oldható meg, forduljon a vevőszolgálathoz.

1. K A termék nem tud bekapcsolni. A; Ha a terméket nem lehet normálisan bekapcsolni, kövesse az alábbi lépéseket a hibaelhárításhoz:

(I) Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter nem sérült-e;

(I) Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

2. K: Az adapter használat közben felmelegszik. V: Ez normális jelenség, és nincs szükség semmilyen műveletre.

3. K: Hosszan tartó használat után foltok vannak a lámpa oldalán.

V: Használat előtt és után nem borotválják le teljesen, így a szőr a lámpafejen marad, és foltokat okoz. Alkoholos vattakorongokkal tisztíthatja meg a termék megfelelő területét, és napi használat során ügyeljen arra, hogy tisztára legyen borotválva.

4. K: Elégedetlen a szőrtelenítő hatással. V: Állítsa be a szintet vagy növelje a használat gyakoriságát Önnek megfelelően. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és az utasítások szerint működtesse, hogy minden alkatrész egyenletesen legyen kitéve a fénynek.

5. K: A szőrtelenítő készülék nem bocsát ki fényt. V: Ha a lámpafej nincs közel a bőrhöz, a szőrtelenítő készülék nem tud normálisan fényt bocsátani. Kérjük, ellenőrizze, hogy a lámpafej 90 fokban érintkezik a bőrrel.

6. K: A szőrtelenítő készülék automatikusan kikapcsol. V: Ez a termék túlmelegedés esetén elindítja az automatikus túlmelegedés elleni védelmi programot. Kérjük, hagyja kihűlni a terméket szellőző helyen, majd kapcsolja be a terméket, miután kihűlt.

7. K: Használat közben érzékeny a bőr. V: A bőr érzékeny a használat során, ami a következő lépésekkel eltávolítható:

Ha a szintet a bőr kapacitásán túl használja, a bőr kellemetlen érzést fog érezni. Az első használatától lassan alkalmazza az első szinttől, és állítsa be a megfelelő szintre Önnek megfelelően;

Ellenőrizze, hogy a fényáteresztő barázda nem sérült-e, ha sérült, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz a javításhoz.

8. K: Szag használat közben. V: Használat közben sajátos szag jelentkezik, amely a következő lépésekkel szüntethető meg:

Ellenőrizze, hogy a szűrő nem szennyezett-e porral. Napi használat után, kérjük, időben tisztítsa meg a lámpatartót és a környező területet;

Ha a szőr a testfelületen marad, használat közben sajátos szagot áraszt. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szőrét teljesen leborotválta, és használat közben állítsa be a terméket megfelelő helyzetbe.

Hulladékkezelés

Ez a címke a terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama végén nem dobható ki

általános háztartási hulladékként. Kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz a hulladék besorolása szerinti újrahasznosítással kapcsolatban. Kérjük, vegye ki az akkumulátort a gépből, mielőtt kidobja a készüléket, és tartsa a gépet kikapcsolt állapotban az akkumulátor eltávolításakor; az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

