



X-Pro


Használati utasítás

Érintőképernyő

Támogatja a fel/le, balra/jobbra működtetést. Kérjük, csúsztassa a képernyő keretét az ujjával-nyomja.

2 az 1-ben

Töltőalap + fali tartó.

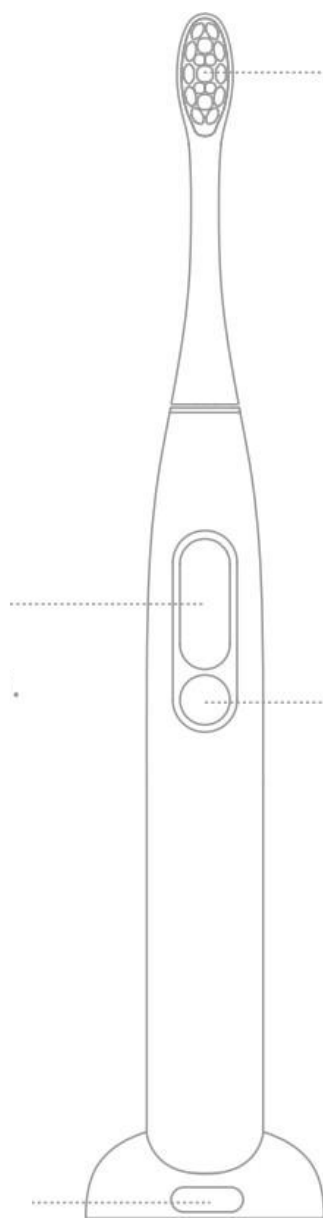

Kefefej

A kefefej cseréjekor húzza kivagy helyezze be függőlegesen, ahelyett, hogy balra-jobbra forgatná. A fogorvos azt javasolja, hogy a kefefejet 2-3 havonta cserélje ki.

Be/kikapcsolás/szünet

Amikor a fogkefe felébred, a gomb rövid megnyomása a futó állapot alatt szünetelteti a működést; és 15 másodpercen belül ismét rövid megnyomásával folytathatja a működést; 15 másodpercnél hosszabb ideig tartó hibás működés esetén alvó üzemmódba lép.

Első használat

A fogkefe és a Bluetooth aktiválásához nyomja meg röviden a ON/OFF gombot, az aktiválás után a készülék folyamatosan készenléti állapotba kerül.


Kefélési terv

A fogmosás alapértelmezett üzemmódban a "Standard tisztítási terv" 2 perc alatt indul, ha nincs új, testreszabott fogmosási terv beállítása az APP-ban.

Vibrálással emlékeztetőhangjelzés fogja emlékeztetni a felhasználót, hogy 30 másodpercenként változtassa meg a fogmosási területet. A fogkefe 2 perc után automatikusan leáll.

Töltés

Kérjük, töltés előtt törölje szárazra a fogkefét. Kérjük, tartsa szemmel az akkumulátor százalékos töltöttségét, csak akkor töltse fel, ha az akkumulátor alacsony, NE töltse túl, vagy ne ismételje meg a töltést gyakran.

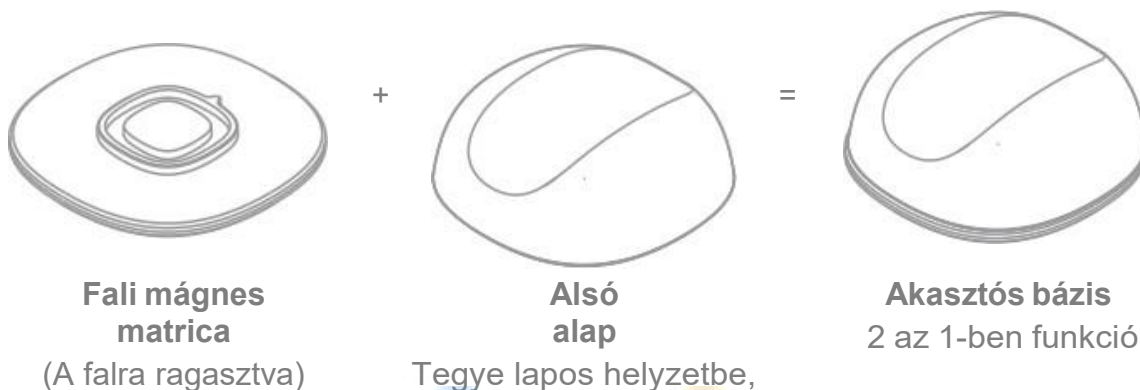

Tegye lapos helyzetbe, amikor töltéshez használja. Tartsa függőlegesen, és helyezze a falra mágneses matricához, ha tartónak használja

Megjegyzések



Falra szerelhető

A fali függeszték felszerelésekor ügyeljen arra, hogy az alapfelületet helyezze el. A táblán lévő kis nyíl felfelé néz.

Fontos biztonsági tippek

- Ez a termék 12 évesnél idősebbeknek ajánlott.
- Ez a termék csak Oclean kefefejeket használhat, és nem viseli a nem tanúsított, harmadik féltől származó kefefejek minden következményét.
- Ez a termék kizárólag személyes tisztítószer, és nem ajánlott orvosi vagy többfelhasználós használatra.
- Ez a termék csak beltéri használatra alkalmas. Ne tegye közvetlen napfényre. Ajánlott száraz és szellőztetett helyen elhelyezni.
- Töltés előtt tartsa a testet szárazon, és rendszeresen tisztítsa meg a töltőalapot száraz ruhával, hogy megakadályozza a foltok lerakódását.

Használata nem ajánlott

- Olyan személyek, akik nemrégiben szájsebészeti műtéten estek át. Javasoljuk, hogy azok a fogyasztók, akiknek szájüregi betegségük van, például fogszuvasodás, parodontális (íny) betegség, szájüregi rák, szájüregi fertőző betegség, konzultáljanak fogorvossal, mielőtt ezt a fogkefét használnák.
- Az értelmi és/vagy fizikai fogyatékossgal élő személyek csak felügyelet mellett használhatják.
- Azok, akiknek szájbetegségeik, laza műfogaik vagy vérző ínyük van.
- Az érzékeny és fogékony szájüreggel rendelkezőknek a termék használata előtt konzultálniuk kell egy szakképzett fogorvossal.
- A fogkefe nem alkalmas csökkent szellemi és fizikai képességű személyek számára. Csecsemő és 12 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. A termékhasználó gyermekeket szigorúan fel kell figyelnie.

Utasítások

- **Első használat**
A fogkefe bekapcsolása az ON/OFF gomb első megnyomásával történhet egy vadonatúj fogkefe esetében. A Bluetooth funkció aktiválódik és bekapcsolva marad. Az Oclean App telepítése után kérjük, töltsse ki a felszólításokat a fogkefecsatlakoztatásának és beállításainak befejezéséhez.
- **Alkalmazás telepítése és fogmosási beállítások**
Az alkalmazással testre szabhatja fogmosási programjait - automatizálhatja a fogmosást, a fogfehérítést és az ínymassázst egyetlen fogmosás során. Nincsszükség arra, hogy minden fogmosáskor megnyissa az Oclean alkalmazást.
Egyszerűen csak nyissa meg az alkalmazást néhány naponta a fogmosási adatokszinkronizálásához.
- **Közvetlen használat az alkalmazás beállításai nélkül**
A fogkefét az alkalmazáshoz való csatlakozás nélkül is használhatja. Érintőképernyős kijelzővel és ON/OFF gombbal rendelkezik. Érintésvezérlést kínál az érintésérzékeny képernyőn keresztül.
- **Kefésítési teljesítmény**
A kefézés után a kijelzőn megjelenik a tényleges kefézési idő, a kefézési pontszámok és a kefézés terület tippjei.
- **Ellenőrizze a fogmosási rekordokat az alkalmazásban**
Csak miután a fogkefe párosítva van az alkalmazással és csatlakozik a Bluetooth-hoz, az alkalmazás hozzáférhet a fogkefében tárolt fogmosási

adatokhoz. A korlátozott tárhely miatt a fogmosási adatok általában legfeljebb 7 napig tárolhatók.




- **Mód beállítása**

A kijelzőn felfelé és lefelé csúsztatással lépjen be az üzemmód-beállítási szakaszba. Az egyes üzemmódok, mint például a Tisztítás, Fehérités és Masszázs, 32 tisztítási intenzitási fokozattal rendelkeznek. Az új beállítás elvégzése után az automatikusan regisztrálódik a memóriában.


Kefésítési intenzitás: A

képernyőn fel/le csúsztatva az intenzitás 1 szinttel (+1 vagy -1) változik; Oldalra


csúsztatva a képernyő oldalán fel/le, az intenzitás 5 szinttel (+5 vagy -5) változik.

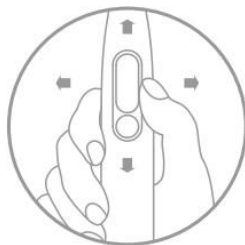

Csúsztatás fel/le/jobbra/balra

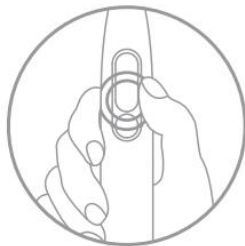

A beállítások megerősítéséhez nyomja meg hosszan a képernyőt vagy röviden a bekapcsológombot.

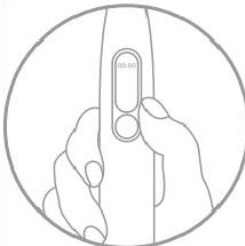

Időbeállítás Kapcsolódjon az alkalmazáshoz és párosítsa a fogkefével a szinkronizáláshoz. Az üzenet után a fogkefe automatikusan frissül a helyi időre.



- Ne alkalmazza a készüléken a következőket: szétszerelés, ütés, extrudálás vagy tűzbe dobás.
- Kérjük, ne használja tovább a fogkefét, ha az akkumulátor kitágult.
- Kérjük, ne tegye az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetbe.
- Ne használja az akkumulátort, ha víz került a készülékbe.

Fogmosási terv és az alkalmazás beállításai

A támogató Oclean App segítségével kiválaszthat vagy testre szabhat egy fogmosási tervet. A firmware-t is frissítheti, hogy folyamatosan frissítse a teljesítményét.

Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztető üzenet

Ha az akkumulátor százalékos aránya 20%-nál alacsonyabb, a fogkefe kijelzőjén gyakran megjelenik az alacsony akkumulátor töltöttségi szintre vonatkozó figyelmeztetés, akkor a fogkefét fel kell töltenie. Amikor az akkumulátor 1%-nál alacsonyabbat mutat, a motor rezgése fogja Önt felszólítani, és a képernyő nem lesz bekapcsolva.


Hogyan kell tölteni

Vegye le a töltőalapot a fali tartóról, és csatlakoztassa a mobiltelefon töltőjéhez. Amikor a fogkefe alját óvatosan a töltőalap fölé helyezi, az automatikusan elhelyezkedik. A kijelzőn megjelenik az akkumulátor százalékos töltöttségi szintje, amikor a fogkefe töltődik. Egy teljes feltöltés általában körülbelül két órát vesz igénybe.

Fontos töltési tippek

A fogkefe gyorstöltő mechanizmussal működik. Javasoljuk, hogy a fogkefét csak akkor helyezze a töltőalapra, amikor erre szükség van. Kérjük, ne tegye a fogkefét hosszú időre a töltőalapra, mert ez a beépített akkumulátor idő előtti leépülését okozhatja, így a felhasználói élményt befolyásolja.

Ajánlott fogmosási módszer

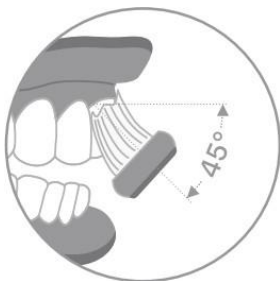

A fogak megfelelő mosásához lassan, 45°-ban mozgassa a sörtéket az ínyvonalához képest. Nem kell a sörtéket kézzel fel-le mozgatni.




Fogja meg a fogkefe nyelét, és lassan mozgassa körkörös mozdulatokkal. Ne nyomja túl erősen.




Kefélés után öblítse le tiszta vízzel.

Tisztítás és karbantartás

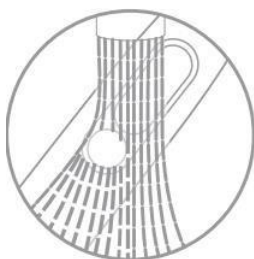


A test és a kefefej tisztítása

Öblítse le vízzel és szárítsa meg levegőn, ne húzza a sörtéket.

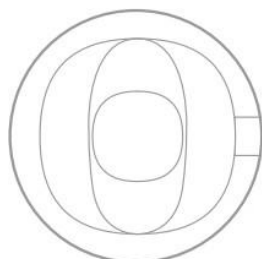

Tisztító töltő

Tisztítsa meg a töltő piszkos részeit puha ruhával. A töltő tisztítása előtt feltétlenül húzza ki az akkumulátor dugóját a csatlakozóból, és csak akkor használja újra, ha teljesen megszáradt.

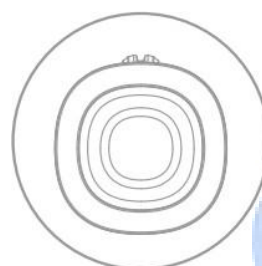

A fogantyú aljának tisztítása

Töltés előtt mindig tartsa az alját tisztán és szárazon. A fogantyú piszkos részeit puha ruhával tisztítsa meg.

Műszaki adatok

Termék neve	Oclean Smart Sonic elektromos fogkefe
Modell	Oclean X
Kiadás	Pro
Maximális teljesítmény	0dBm
Vízálló	IPX7
Teljesítmény	1.8W
Töltő	USB töltő
Bemenet	5V1A
Az akkumulátor élettartama*	20 nap (1. szint), 40 nap (32. szint)
Az akkumulátor kapacitása	800 mAh
Töltési idő	2 óra
Bluetooth	4.2 fent

* 2 perc/idő, kétszer/nap

Jótállási feltételek

Ha agaranciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitétség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

mulan.hu

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Cím: Smart Sonic elektromos fogkefe: Smart Sonic elektromos

fogkefeModell / típus: X Pro

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU

irányelv

2014/35/EU

irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



mulan.hu

WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

