

Ocliclean Flow Elektromos Fogkefe

Használati útmutató

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Első pár használatnál viszketést érezhet, vagy enyhe vérzést tapasztalhat, ez normális. Ez azért van így, mert az íny nincs felkészülve a hatékony tisztításra. Ez a tünet általában 1-2 héten belül elmúlik. Amennyiben a tünetek nem múlnak el, ne használja tovább a fogkefét és konzultáljon fogorvosával.

Azok a felhasználók, akik fogászati kezelés, szájsebészeti eljárás alatt állnak, vagy implantátumot viselnek, csak fogorvos felügyelete alatt használják a fogkefét. Azok, akik érzékeny, szuvas foggal rendelkeznek vegyék fel a kapcsolatot fogorvossal a termék használatba vétele előtt.

Az Oclean Flow termék minden biztonsági előírásnak megfelel az elektromágneses készülékekkel kapcsolatban. A pészmekekkel és implantátumokkal kapcsolatban konzultáljon orvosával a termék használata előtt.

Ez a termék csak a fogak, az íny és a nyelv tisztítására használható. Ne használja ettől eltérő célokra. Amennyiben kellemetlenséget, fájdalmat érez, ne használja tovább a fogkefét és konzultáljon orvosával.

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne merítse a töltő kábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a fogkefe megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a fogkefét tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készülék használatát 12 éves kor felett javasoljuk.
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- Nem javasolt a termék használata olyan személyek esetén, akik szájbetegséggel rendelkeznek, laza a foguk vagy az ínyük, illetve

fogínyvérzésük van.

- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy nyitogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a fogkefe felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket az új töltéskor azt tapasztalhatja, hogy a töltés jelző nem világít. Várjon 5-10 percet, hogy elkezdjen tölteni.

A fogkefe tisztítása

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószer, mert károsíthatják a burkolatát.

A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

Használat

Ne ossza meg másokkal a fogkefe használatát.

A készülék csak speciális Oclean szónikus kefefejjével használható. A gyártó és forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget más kefefejjével történő használatból adódó következményért.

Specifikáció	
Megnevezés:	Oclean Flow
Modell:	F5002
Teljesítmény:	1.85 W
Motor teljesítmény:	38000 vpm (max)Töltési idő: Kb. 5 óra
Akkumulátor:	2500 mAh
Üzemidő:	≤ 180 nap (naponta 2 használat, 1 használat 2 perc)
IP vízállósági osztály:	IPX7
Töltés:	Type-C
Töltő dokkoló bemenet:	5V 1A
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és akörnyezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.	

Doboz elemei:

- Fogkefe
- 1 db. kefefej
- Type-C kábel
- Felhasználói kézikönyv
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)
Address: #28G, Building 3, Dachong, Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue) Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)


A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

HASZNÁLAT

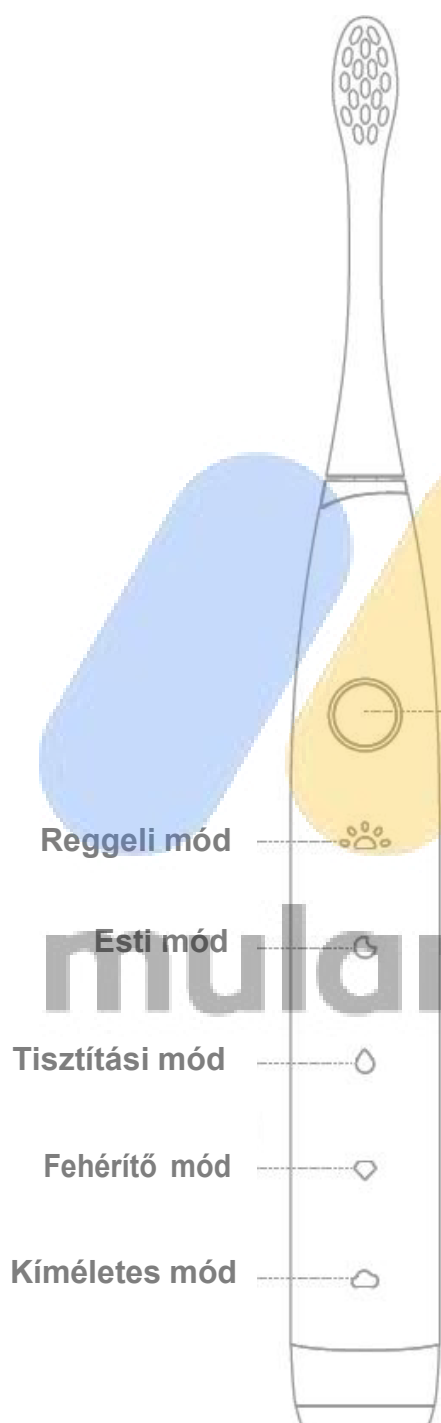

Be/ki/üzemmód váltás

Bekapcsolás:

Nyomja meg a gombot

Üzem mód váltás:

A bekapcsolást követő 5 másodpercen belül a gomb megnyomásával válthat az üzemmódok között, amikor az üzemmód jelzőfény lassan villog.

Kikapcsolás:

A kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot, miután az üzemmódot kíméletes módba váltotta.

A bekapcsolást követő 5 másodpercen túl a gomb megnyomásával kikapcsolhatja a készüléket.

A készülék automatikusan kikapcsol, ha a készüléket több, mint 2 percig nem használja a bekapcsolást követően.

Alacsony energiaszint:

Ha az energiaszint 10% alá csökken, a gomb körüli jelzőfény vörösén villogni fog bekapcsolás után.

HASZNÁLAT

Alap használati programok

A készülék öt féle használati módot tartalmaz: Reggeli mód, Esti mód, Tisztítási mód, Fehérítő mód, Kíméletes mód.

- Reggeli mód: az éjszakai módhoz képest a kifejtett nyomás kisebb. A fogkefe hatásosan eltávolítja az alvás során felgyült lepedéket.
- Esti mód: mélyen eltávolítja az ételmaradványokat és a lepedéket erős nyomás segítségével.
- Tisztítási mód: általános, mindennapi használat. Az Esti módhoz képest lényegesen gyengébb nyomáskifejtés.
- Fehérítő mód: hatásosan távolítja el az elszíneződést azok esetében, akik dohányoznak vagy gyakran fogyasztanak kávét, teát stb
- Kíméletes mód: óvja az ínyt a használat során a lepedék eltávolításakor azok esetében akik szájüregi allergiában szenvednek.

Töltés

Nyissa ki a fedelet a fogkefe alján. Csatlakoztassa a C-típusú kábelt a fogkefe alján található csatlakozóba, a másik végét pedig egy hálózati adapterbe (nem tartozék). A gomb körüli jelzőfény fehéren fog villogni, ez a töltés folyamatát jelzi.

Első használat

Töltse fel az akkumulátort az egyéni igényeinek megfelelően.


Energiaszint jelzés

Ha az energiaszint 10% alá csökken, a gomb körüli kijelző vörösén fog villogni bekapcsolás után.

Figyelmeztetések:

- *Ne cserélje ki az akkumulátort saját kezűleg. Csak a gyártó által megbízott szakszerviz végezheti az akkumulátor cseréjét. A saját maga által végzett akkumulátor-csere esetén a garancia érvényét veszíti.*
- *A töltéshez használjon 5V/1A vagy 5V/2A teljesítményű hálózati adaptert (nem tartozék). 1A teljesítmény alatti adapter esetén a töltési idő hosszabb lehet, olyan adapter esetén, amely 5V-nál nagyobb feszültséggel képes tölteni, tönkre mehet a töltési áramkör.*


A FOGKEFE JAVASOLT POZICIONÁLÁSA

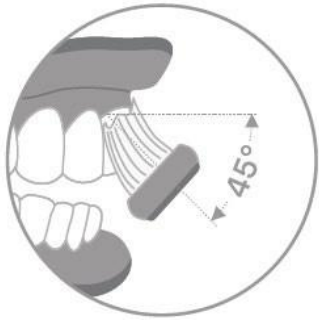

Tartsa a sörtéket 45° szögben az ínyhez képest.
Nem szükséges a sörtékfel/le mozgatása.




Tartsa a fogkefe nyelét és mozgassa lassan
körkörös mozdulatokkal. Nenyomja erősen.

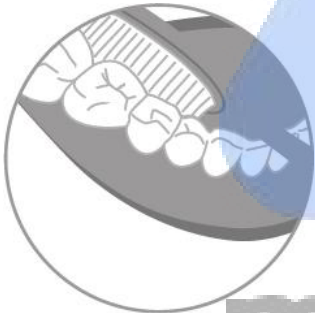

Öblítsen tiszta vízzel használat után.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

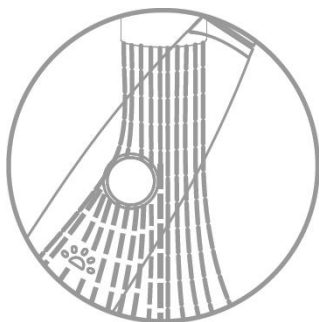

Öblítse el tiszta vízzel minden használat után és
hagyja megszáradni. Ne
húza ki a sörtéket.

mulan.hu