

Yunmai Fascia Masszázsasztoly

Használati Útmutató



mulan.hu

Köszönjük, hogy megvásárolta a YUNMAI Fascia Massage Gun Slim Elegant készüléket.
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
A jövőbeni hivatkozás érdekében kérjük, győződjön meg arról, hogy ezt a kézikönyvet megfelelően őrizte meg.

Alkalmazási kör:

A termék használható fizioterápiás masszázshoz edzés előtt és után.

TARTALOM

Fontos információk — — — — — / P01 - 02

Termékismertető — — — — — / P03

Használati módszer — — — — — / P04 - 06

Tartozékok Bevezetés — — — — — / P06 - 08

Alapparaméterek — — — — — / P08

Gyakran Ismételt Kérdések — — — — — / P09 - 10

Újrahasznosítás — — — — — / P10 - 11

Masszázs pozíció — — — — — /P12-17

mulan.hu

FONTOS!

A meghibásodás, az áramütés, a sérülés, a tűz, a halálesetek és a berendezés károsodásának kockázatának csökkentése érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben található összes nyilatkozatot és figyelmeztetést.

1. Tiltások

01. A termék kiskorúak és sérült személyek általi használata szigorúan tilos. Izomsérülés esetén a termék használata előtt konzultáljon orvosával.
02. Ne használja ezt a terméket nedves vagy piszkos bőrön. Ez a termék ruhás területeken használható. A felhasználók finoman megnyomhatják ezt a terméket a bőrön, mozgathatják a különböző pontokon, hagyva, hogy az egyes helyeken körülbelül 60 másodpercig maradjon.
03. Ne használja ezt a terméket a nyak feletti testrészeken, illetve olyan testrészeken, ahol kevesebb az izom vagy csont. Ez a termék csak lágy szöveteken használható, ha a felhasználó nem tapasztal fájdalmat vagy mellékhatást.
04. Ne használja ezt a terméket zúzódásokkal, fájdalommal vagy mellékhatásokkal járó testrészeken.
05. Ne helyezzen idegen tárgyakat a termék szellőzőnyílásába.
06. Ne merítse vízbe a terméket. Ne engedje, hogy víz lépjen be a szellőzőbe.
07. Ne helyezze a terméket tűzforrásba vagy közelébe.
08. Ne dobja vagy ejtse le a terméket szándékosan.
09. Ne töltsé újra a terméket más töltővel, mint a YUNMAI által biztosított.
10. Ne szerelje szét a terméket.
11. Ujjak, haj vagy más testrészek beszorulhatnak a masszázsfej szárába és hátuljába. Ne érintkezzen szorosan ezekkel a területekkel.
12. 8 év alatti gyermekek számára nem ajánlott. Gyermekeknek nem szabad használni, tisztítsa és tartsa karban a terméket felügyelet nélkül.



Ne érintse meg ezt az alkatrészt, hogy elkerülje a becsípődést, ha a gép be van kapcsolva anélkül, hogy a masszázsfel van szerelve.



Ne érintse meg ezt az alkatrészt, hogy elkerülje a becsípődést, amikor a gép be van kapcsolva, és fel van szerelve a masszázsfel.

2. Nyilatkozat

Azok, akiknél az alábbi állapotok bármelyike fennáll, használat előtt konzultáljon orvosával.

01. Terhes nők
02. Pacemaker viselő
03. Nemrég műtéten esett át
04. A gerincek, ízületek vagy csontok rendellenességei
05. Más betegségek által okozott szövődmények (például neuropátia vagy retinakárosodás)

A jelenlegi kutatások a vibrációs tréning speciális egészségügyi állapotokra gyakorolt hatására összpontosítanak, és csökkenthetik a fent említett ellenjavallatok körét.


A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a kezelés kombinációja és a vibrációs tréning sok esetben egyfajta terápiaként is szolgál.

Az ilyen megközelítést azonban orvosoknak, szakértőknek vagy terapeutáknak kell javasolniuk, vagy az ő jelenlétében kell elvégezniük.


3. Óvintézkedések

01. A töltés befejezése után húzza ki a töltőt.
02. Ne használja a terméket feltöltött állapotban.
03. Kérjük, kövesse a termék használati utasítását.
04. Minden használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék megfelelően használható-e a használati utasításban leírt kezelési módoknak megfelelően.

Termék bemutatása

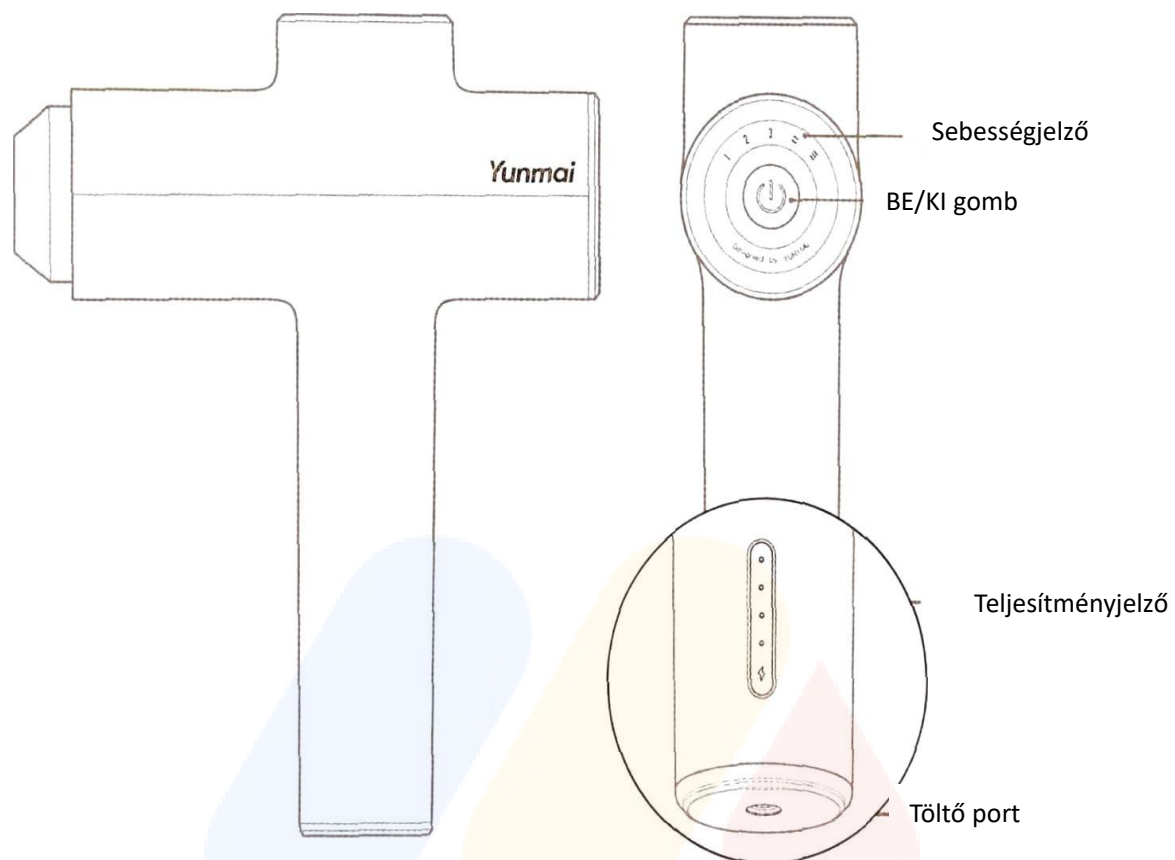


Masszázsfej

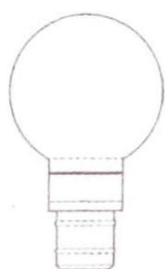


Kerek fej

Főleg nagy izomcsoportokhoz

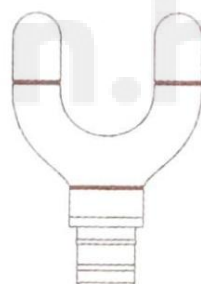


U-alakú fej

Főleg a nyakra, a gerinc mindkét oldalára és az Achilles-ínekre használják.

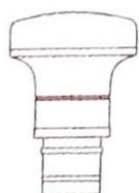

Lapos fej

Főleg izomrészek ellazítására és formálására szolgál

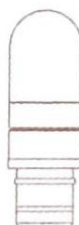


Golyó fej

Főleg a mély szövetekhez

Felhasználási módszer

Működés

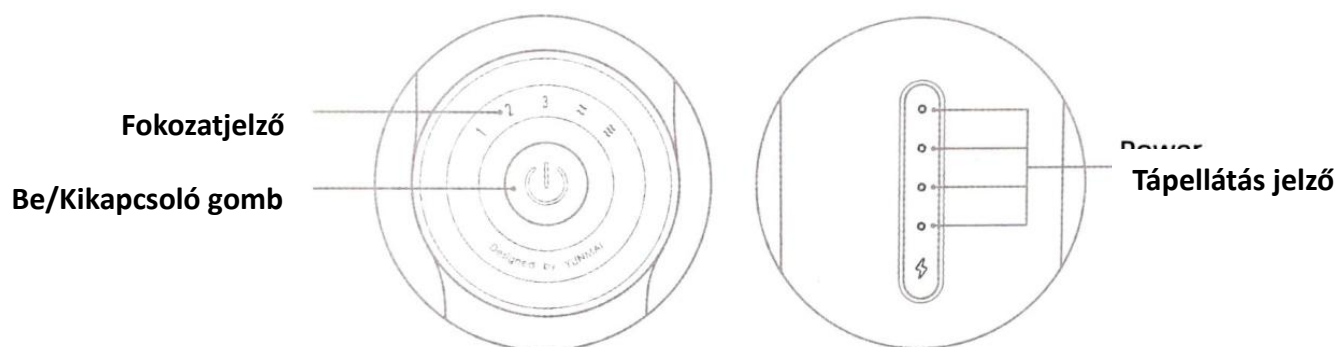

1. Sebességjelző: 3 sebesség a standard módhoz, 2 sebesség a masszázsmódhoz

2. Be/Kikapcsoló gomb:

1) Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 2 másodpercig, amíg a „bekapcsolás” és az „üzemmód” visszajelző világít. 5 mód van az izmok ellazítására. Rövid megnyomással válthat az 1-3 standard üzemmód és az 1-2 masszázsmód között. A Masszázsoszlop rövid megnyomásával készenléti üzemmódba lép a 2. masszázsmód után.

2) Nyomja meg hosszan a kikapcsoláshoz bármely módban.

3) Készenléti üzemmódban, 15 másodpercig tartó működés nélkül a termék bekapcsol kikapcsolni.

4) A termék 10 perces folyamatos használat után intelligens kikapcsolásvédelmi módba lép. Indítsa újra a terméket, ha használnia kell.

3. Be/Kikapcsoló gomb:

1) Ha a jelzőfények mind világítanak, a banyapower 100%.

2) Ha három jelzőlámpa világít, az akkumulátor töltöttsége 65%-80%. 3) Ha két jelzőlámpa világít, az akkumulátor töltöttsége 40%-60%.


4) Ha az egyik jelzőfény világít, az akkumulátor töltöttsége 20-35%.

Az akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni, ha csak egy jelzőfény világít. (Ha az akkumulátor töltődik, a jelzőfények rendszeresen villognak.


Ha minden jelzőfény világít, akkor teljesen fel van töltve.)

Megjegyzés: A masszázs üzemmód indításakor a motor fordulatszáma szinuszos ingadozás alatt áll. Ez a folyamat gyorsulás és lassulás szélhangját fogja produkálni, ami normális.


Masszázsfej összeszerelése

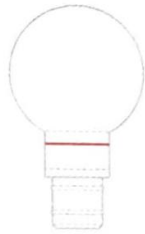


Kerek fej

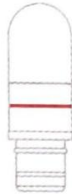

Golyó fej

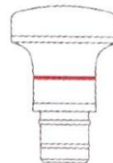

Lapos fej

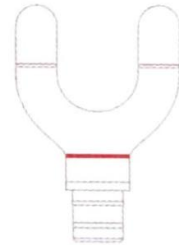

U-alakú fej

Megjegyzések: Az ábrán látható piros folytonos vonal az igazítási vonal, amely a tényleges termékben élénk fekete.


A masszázsfej összeszerelésekor vagy cseréjekor kérjük, helyezze be a masszírozófejet közvetlenül a masszázspisztoly szájába, amíg az igazítási vonal egybe nem esik a szájjal (az ábrán látható módon);

a masszázsfej cseréjekor közvetlenül húzza ki a masszázsfejet.



Töltés

A töltőcsatlakozó a masszázspisztoly markolatának alján található.

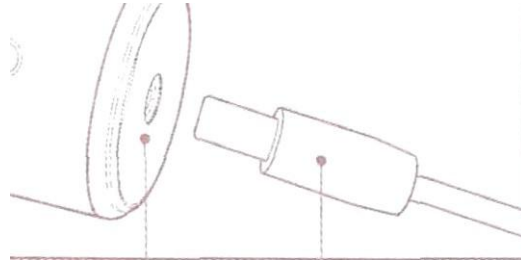

Töltő port


USB kábel

1. Kérjük, töltsd fel teljesen a masszázspisztolyt az első használat előtt.
2. A töltő bemeneti feszültsége 100-240 V.
3. Amikor a masszázspisztoly töltődik, a tápfeszültség jelzőfény folyamatosan villog.
4. Amikor a masszázspisztoly teljesen feltöltődött, a teljesítményjelzők mind világítanak.
5. Az akkumulátor bármikor és bármilyen teljesítményszinten tölthető. A terméket töltés közben nem lehet elindítani.
6. Ha csak egy jelzőfény világít, az akkumulátor lemerült. Kérjük, töltsön fel.

Tartozékok bemutatása

Helyezze be a masszázsféjet


Helyezze be a masszázspisztolyt

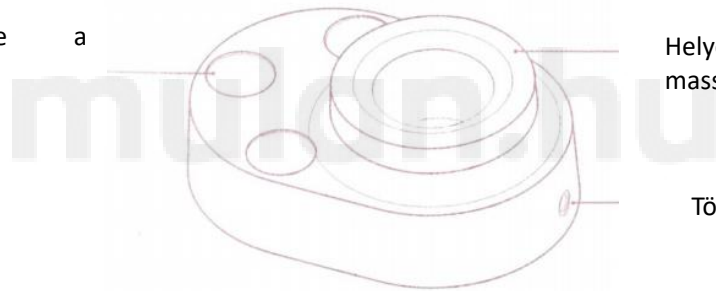


Tároló töltőbázis

Bemutató

1. Helyezze be a masszázspisztolyt és a masszírozófejeket a tároló töltőaljzatba.

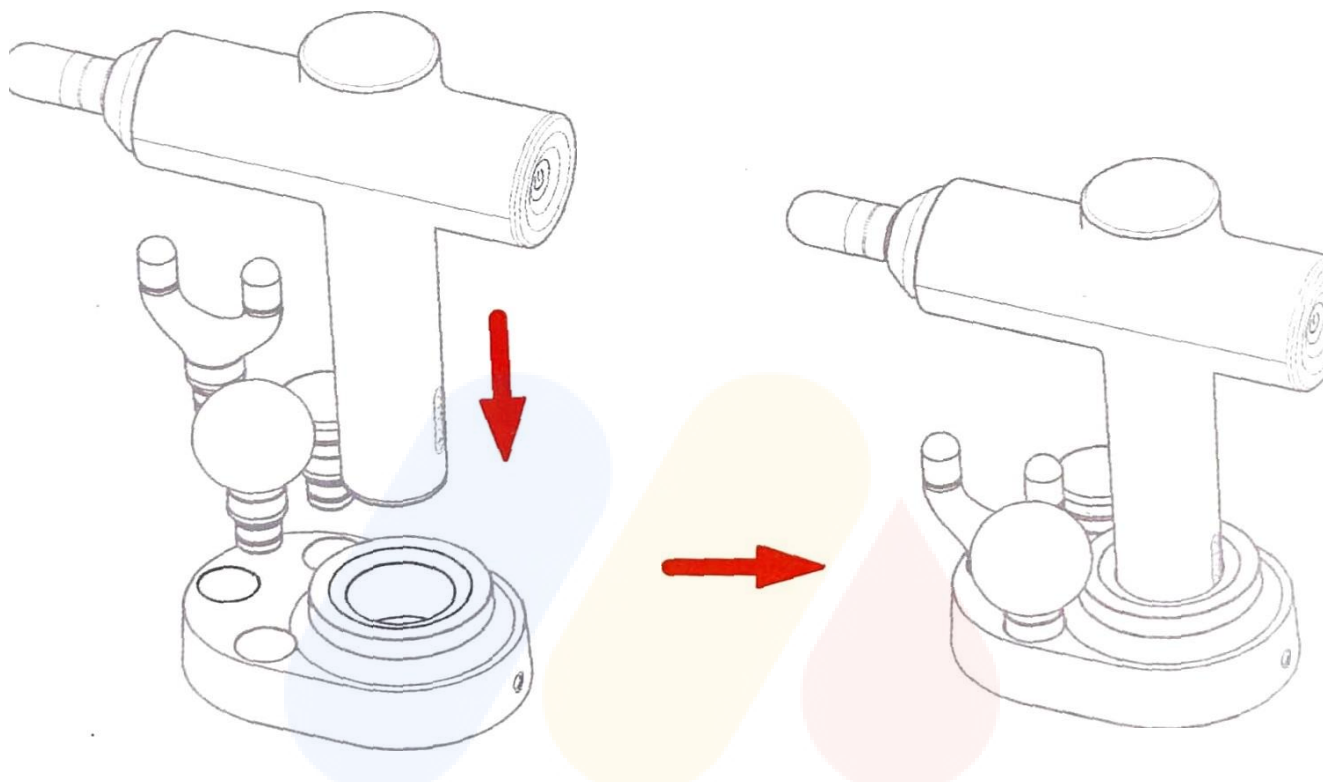

2. A töltéshez csatlakoztassa a töltőkábelt a tároló töltőaljzathoz.

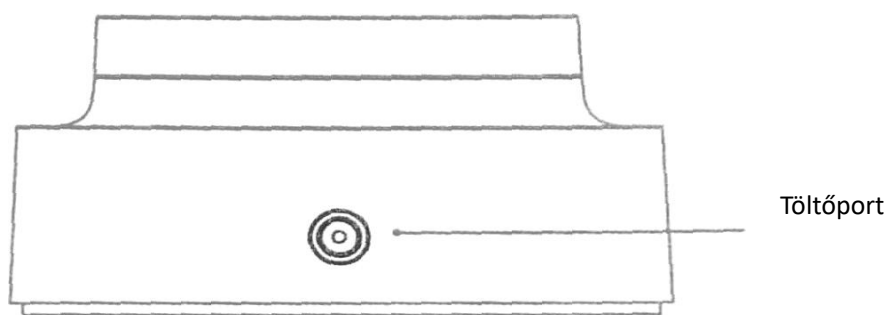


A kivehető zselé bemutatása

A töltőtálp alatt két zselé található. A felhasználó eltávolíthatja a rajta lévő műanyag lapot, és a töltőalapot tiszta felületre ragaszthatja. (A zselé kivehető, mosható és többször használható.)

Megjegyzés:

Ne helyezze a töltőalapot a rámpára vagy a szélekre, nehogy a masszázspisztoly leeszen és megsérüljön.

Ne ragassza a töltőalapot a poros helyre, ellenkező esetben a zselé tapadósága megváltozik.

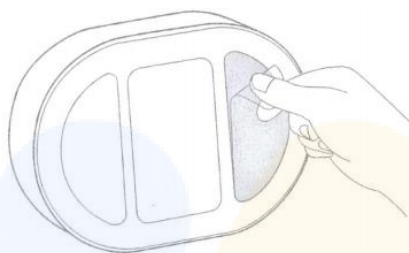

Kivehető zselé tisztítása

1. Ha a gél nem ragadós, akkor egy kis vízzel áttörölheti, és árnyékban száríthatja.
2. Ne törölje le papírral, törülközővel vagy más olyan tárggyal, amelyről könnyen leesik a morzsa.
3. A rövidzárlat elkerülése érdekében ne mossa le a töltőalapot.

Alapvető paraméterek

Név: YUNMAI Fascia Massage Gun SE	Típus: MV-FG-0308
Nettó tömeg: 0,84 kg	Bemeneti feszültség: 100-240V~50/60Hz
Interfész típusa: DC, 19V::: 1A	Akkumulátor kapacitása: 2900 mAh
Intenzitás fokozatok: 5 fokozat	Töltési idő: kb 4 óra
Tápellátás módja: Újratölthető Li-ion akkumulátor	Alkalmazható környezeti hőmérséklet: 0-40°C
Mérete: 179 x 60 x 236 mm	Alkalmazható életkor: 18 év feletti felnőttek (kivéve terhes nők)

Gyakran Ismételt Kérdések

Indítási hiba

1. Magas hőmérséklet:

Ha 40°-nál magasabb hőmérsékletű környezetben használják, a szalagos masszázspisztoly túlmelegedés elleni védelmet válthat ki, és nem kapcsol be.

Megoldás:

Használat előtt helyezze a masszázspisztolyt 40°C alatti környezetbe 2 órára.

2. Az akkumulátor kapacitása "O":

Ha az akkumulátor lemerült, és a felhasználó hosszabb ideig nem tölti, az akkumulátor lemerülő töltés elleni védelmet indít el, amelyet összefoglalóan túlmerülés elleni védelemnek nevezünk.

A masszírozópisztoly nem tud megfelelően működni, ha ekkor indítja el.

Megoldás:

Tartsa kikapcsolva a masszázspisztolyt, és csatlakoztassa az áramforráshoz.

A masszázspisztoly automatikusan töltési állapotba lép.

Amikor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt, és a masszázspisztoly normálisan működhet.

Töltési hiba

1. A masszázspisztoly túlmelegedése:

Ha a masszázspisztoly hőmérséklete túl magas, nem lehet feltölteni.

Megoldás:

Töltés előtt helyezze a masszázspisztolyt 40°C alatti környezetbe 2 órára.

mulan.hu

A termék ésszerű használata hatékonyan meghosszabbíthatja annak élettartamát

Javaslatok:

1. Ne dobja és ne dobja el a terméket.
2. Tartsa a maximális folyamatos üzemidőt 30 perc alatt.
3. Kérjük, félévente töltsen fel a terméket, ha hosszabb ideig nem használja.

Masszázspisztoly működési hibaelhárítása	
Hiba leírása	Hibaelhárítás
1. A masszázsfej kicsúszik és leesik	Ellenőrizze, hogy a masszírozófej a helyére van-e szerelve (lásd a kezelési útmutató 5. oldalát)
2. A terméket nem lehet elindítani	Ellenőrizze, hogy elegendő-e az áramellátás (ha a terméket hosszabb ideig nem használta, kérjük, töltsen 8 óránál tovább)
3. A termék nem tölthető fel	Ellenőrizze, hogy a töltőcsatlakozó és a tápegység a helyére van-e dugva
4. A termék 10 perc folyamatos működés után hirtelen leáll	Ez a jelenség normális, mivel a hosszú távú működésvédelem beállítása okozza, amely üzemből készenléti módba vált át. A termék rövid üzemű megnyomásával újraindítható (lásd az utasítások 4. oldalát az adott művelethez)
5. A termék leáll, miután a masszírozófej a reteszelt rotor jelenségével találkozik	Ez a jelenség normális, mivel a rendellenes működés elleni védelem beállítása okozza, amely működésből készenléti módba kapcsol. A termék újraindítható a reteszelt rotoros nyomással. (lásd az utasítások 4. oldalát az adott művelethez)

Újrahasznosítás

Ne dobja ki ezt a készüléket az általános háztartási hulladékkal együtt, amikor az élettartama végén jár. Helyezze a kormány által kijelölt hulladékgyűjtőbe.

1. Karbantartás, tisztítás, tárolás, szállítás

01. Tisztítsa meg a készüléket egy nedves törülközővel, és törölje szárazra egy puha ruhával.

02. Tárolás vagy utazás közben helyezze a készüléket a mellékelt csomagolódobozba.

03. Ezt az eszközt száraz, jól szellőző és nem korrozív helyen kell tárolni. Az eszközt a padlótól legalább 250 mm-re kell elhelyezni, és a tetején lévő rétegek száma legfeljebb 5 lehet.

04. Ezt az eszközt megfelelően be kell csomagolni és megfelelően tárolni, ha hosszabb ideig nem használja.

Ilyen körülmények között a készüléket 6 havonta egyszer fel kell tölteni.

05. Ez az eszköz szállítható autóval, vonattal, tengeren vagy légi úton.

06. Szállítás közben ezt az eszközt óvatosan kell kezelni, és jól rögzíteni kell függőleges helyzetben, hogy elkerülje az erős vibráció, ütközés, gurulás vagy leesés okozta károsodást. Vízszigetelő intézkedéseket is be kell tartani.

2. A benne lévő veszélyes anyagok neve és tartalma

Név	Veszélyes és mérgező anyagok					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Héj	0	0	0	0	0	0
Áramköri lap összeállítás	X	0	0	0	0	0
Fém alkatrészek	0	0	0	0	0	0
Műanyag alkatrészek	0	0	0	0	0	0
Adapter	X	0	0	0	0	0
Összekötés	0	0	0	0	0	0
Kormányfogantyú	0	0	0	0	0	0

Ez a táblázat az SJ/T 11364 szabvány szerint készült

I: Az áramköri lapok a nyomtatott áramköri gépek alkatrészeiből állnak, mint például ellenállások, kondenzátorok, integrált áramkörök, csatlakozók.

o : Ez azt jelenti, hogy a készülék homogén anyagaiban lévő veszélyes anyagok tartalma a GB/T26572-ben meghatározott határértéken belül van.

x : Azt jelenti, hogy a készülék egyes homogén anyagaiban található veszélyes anyagok mennyisége meghaladja a GB/T26572-ben meghatározott határértéket.

3. Útmutató a környezetvédelmi élettartamhoz

Az ebben a készülékben található veszélyes anyagok vagy anyagok nem szivárognak ki, ha a készüléket a kézikönyvben megadott feltételek mellett használják. A készülék akár évekig is használható anélkül, hogy bármilyen környezetszennyezést vagy súlyos emberi szervezet- vagy vagyongárosodást okozna.

